

Airnergy Kurzanleitung

1. Zubehör



2. Installation

1



Stecken Sie den Luftfilter mit einer leichten Drehung in den dafür vorgesehenen Anschluß an der Geräte-rückseite.

2




Schließen Sie das Netzteil an.

3



Befüllen Sie die Glasflasche zu etwa einem Drittel (ca. 250 ml) mit Trinkwasser (ohne Kohlen-säure).

4

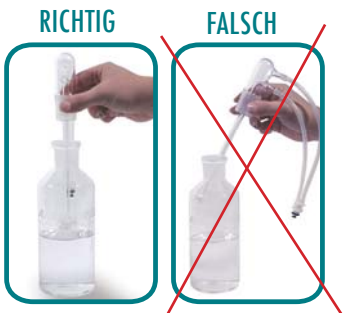

Setzen Sie das Sprudelement vorsichtig in die Glasflasche ein.

5



Stellen Sie die Glasflasche mit dem Sprudelement in die vorgesehene Vertiefung auf der Geräteoberseite.



Mehr Info: +49 (0) 22 42 - 93 30 - 0

Airnergy AG • Wehrstraße 26 • 53773 Hennef • www.airnergy.com


AIRNERGY+
ENERGIE VON INNEN

6



Verbinden Sie den Adapter des Sprudelementes mit der Anschlußbuchse. Der Adapter rastet mit einem „Klick“ ein.*

7



Zum lösen des Adapters, drücken Sie seitlich gegen den Metallverschluss und ziehen daran. Bitte ziehen Sie nie direkt an den Schläuchen!

8



Stecken Sie die Atembrille an der Gerätevorderseite auf die Auslassdüse. Lassen Sie vor dem Aufsetzen der Atembrille die Luft einen Moment zur Entlüftung durchströmen.

* Falls sich die Gerätebuchse verriegelt hat, drücken Sie vorher gegen den Metallverschluss, so dass der Metallstift nach oben gelangt. Sollte der Adapter einmal schwergängig einrasten, bestreichen Sie die Dichtungsringe mit etwas Vaseline.

3. Aufsetzen der Atembrille

1



2



3



Um den Eigengeruch einer neuen Atembrille zu neutralisieren, empfehlen wir die Atembrille vor der Anwendung eine Weile aus der Verpackung zu nehmen und vor dem Aufsetzen die Airnergy Luft durchströmen zu lassen.

4. Inbetriebnahme

1



Betätigen Sie die POWER-Taste um das Gerät einzuschalten. Das Gerät startet mit einem Selbsttest.

2



Stellen Sie über die PLUS und MINUS-Taste die gewünschte Behandlungsdauer ein.

3



Wählen Sie über die INTENSITY-Taste zwischen drei Intensitätsstufen (50% 75% 100%) aus. Die Werkseinstellung ist 100%.

4



Die gewählte Einstellung lässt sich über die MEMORY-Taste für Ihre nächsten Anwendungen speichern.

5



Durch betätigen der START-Taste beginnen Sie die Anwendung. Atmen Sie normal weiter.

5. Probleme und Rückfragen

Sollten bei dem Aufbau oder bei der Anwendung Probleme oder Fragen auftreten, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne.

Mehr Info: +49 (0) 22 42 - 93 30 - 0

Airnergy AG • Wehrstraße 26 • 53773 Hennef • www.airnergy.com

AIRNERGY+
ENERGIE VON INNEN